
Kuumasaumaaja

MEDNIEMI

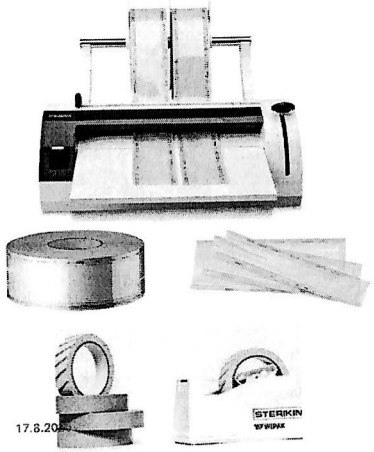


- Kuumasaumaajalla suljetaan steriloitavat autoklaavipussit (sterilointiletku, sterilointipussi)
- Sauman tulee olla kokonainen ja rypytön, pussin tulee pysyä ehjänä
- Kuumasaumaus pitää pakkauksen steriilinä vuoden
- Autoklaaviteipattu pussi pysyy steriilinä 6kk

PÄIVÄYSTEN KIRJAAMINEN PUSSEIHIN, SAUMAN ULKOPUOLELLE, MILLOIN EPÄSTERIILI

Autoklaavimme: Euronda ja Melag

MEDNIEMI

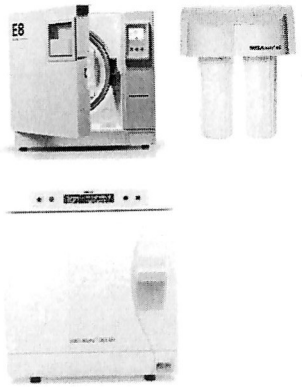

- Hammashoidossa on B-luokan, tyhjiöautoklaaveja, koska käytössämme on pakattuja onteloinstrumentteja.
- Eurondalla on omat vesisuodattimet, Melagiin tulee lisätä ja tyhjentää tislattua vettä.
- Ohjelmia ovat:
  - Pakkaamaton: 134R (=134 C regular)
  - Pakattu: 134B (=134 C, vacum)
  - Vacum/ tyhjiövuototesti
  - Helix
  - Bowie&Dick
  - (Prion)

Välinehuollon laadunvarmennus, ylläpitotehtävät ja huoltotoimenpiteet

1. Laadunvarmennus – läpäistävä 1x/vko
   1. Autoklaavin Vacum/ Vuototesti ja Helixtesti maantai aamuisin ja keskellä päivää
   2. Ultraäänen foliotesti
   3. Desinfektorin pesuohjelma 3 testi
2. Ylläpito
   1. Autoklaavin kammio tulee pyyhkiä joka aamu (kun vielä kylmä) A12T – kerää öljyä
   2. Autoklaavin vesisuodatinsihti tulee avata ja puhdistaa nöyhdästä
   3. Desinfektoriin tulee laittaa suolaa ja puhdistaa clean ohjelmalla
3. Huoltotoimenpiteet
   1. Pääveden karkeavesisuodattimien vaihto
   2. Autoklaavin omien vesisuodattimien vaihto
   3. Desinfektorin lapojen ja suodattimien puhdistus

MEDNIEMI

Din tandläkare • Sinun Hammaslääkärisi

Joka laitteella on laadunvalvontatestit - kirjataan seinällä olevaan taulukkoon

MEDNIEMI

UÄ	Foliotesti	Viikoittain	Perforoiduttava käytetyssä ajassa
Desinfektori	Pesutesti P3	Viikoittain	Väriläiskän on kadottava kokonaan
Melag ja Euronda	Vuototesti	Viikoittainen	Melag alle 1, Euronda ok
	Helix testi	Viikoittainen	Liuskan oltava tumma
	Itiötesti	Vuosittainen	Raportti Kaikomed
Lääkejääkaappi	Lämpötilan kirjaus	Viikoittainen	Kirjataan seinälle
Sidexis 2D ja 3D röntgen	Laadunvalvontakuvat omilla testikappaleilla	Kuukausittain	Mapitetaan
Röntgen kuvakkeet	Kuvakkeiden virheettömyys	Puolivuosittain	Jäävät testipotilaalle Sidexikseen