

Desinfektori Hydrim

- pesutestin asettelu, hyväksytty pesutesti

MEDNIEMI



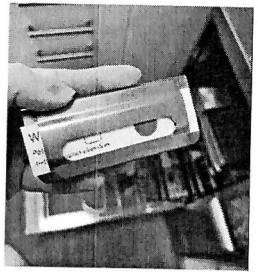

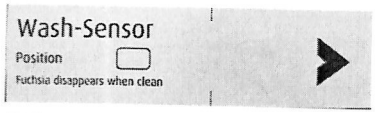

- Desinfektorin pesutesti tehdään P3 ohjelmalla 1x/ vko
- Pesutestiliuskalla oma pidike, joka laitetaan yläkoriin, pesukorien väliin, mahdollisimman lähelle pestäviä instrumentteja
- Pesutesti on hyväksytty kun fuksianpunainen ”veritahra” on kokonaan hävinnyt


Desinfektori Hydrim

- suolan lisääminen

MEDNIEMI






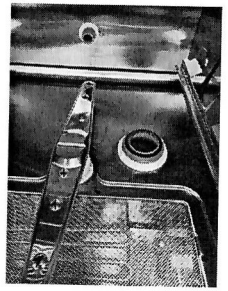

- Desinfektori pyytää suolan lisäämistä
- Alakori vedetään ulos
- Koneen lattiassa oikealla kierrekorkki
- Kierrä korkki pois, täytä kammio raesuolalla, kierrä korkki takaisin

Paineilma

MEDNIEMI

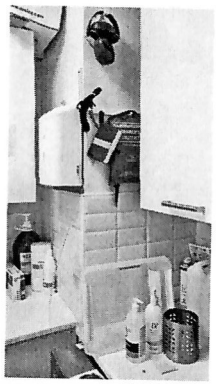

- Paineilmalla ei saa puhaltaa ihoon – paine on niin suuri, että riski ihonalaisen ilmakuplan muodostumiseen on suuri!
- Paineilma on seinäkoukussa
- Paineilmalla kuivataan **vain desinfektorisyklin läpikäyneet** märät instrumentit kannellisen muhvilaatikon sisällä!
- Kuulosuojaimia tulee käyttää!

Ultraääni pesurit

- laadunvalvonta 1x/ vko

MEDNIEMI









- UÄ pesuriin tulee laittaa kaikki poranterät aina ennen desinfektoria. Siksi niillä on oma metallinen oxy 2% keräys kuppi hoitohuoneessa. Kuppi laitetaan sellaisenaan UÄ pesuriin, 5min.
- UÄ pesuriin tulee laittaa kaikki juurihoitoneulat/-viilat aina ennen desinfektoria. Siksi niillä on oma metallinen oxy 2% keräys kuppi hoitohuoneessa. Kuppi laitetaan sellaisenaan UÄ pesuriin, 5min.
- Implanttikirurgian porat ja osat laitetaan omassa silikonisessa kotelossaan UÄ pesuriin, 5min.
- Välinehuollon UÄ pesuri on reilusti huoneen 1 UÄ pesuria tehokkaampi.
- **UÄ pesurin käyttöajan määrittää folio testi! On aika, jolloin folio perforoituu UÄ pesurissa. UÄ on mekaaninen puhdistus, ei kemiallinen! UÄ pesurissa voi veden joukossa olla saippuaa, ei muuta.**