Hoitohuoneen puhtausluokat



- Vihreän alueen on pysyttävä puhtaana. Eli kaapien sisään ei laiteta mitään puhdistamatonta, eikä sieltä oteta mitään likaisin käsin tai likaisin ottimin.
- Sininen alue kosketuskontaminoituu potilastyöskentelyssä.
- Punainen alue on monen potilaan kontaminoima, likaisin alue. Eli imut, käytetyt instrumentit ja roskikset.

46

Hoitohuoneen puhdistusjärjestys






Potilaan noustua tuolista:

1. Ota potilaskohtaiset osat unitista potilastarjottimelle. Eli puustinkärki, käsikappaleet, imukärjet.
2. Vie tarjotin likaiselle puolelle ja heitä kertakäyttö materiaalit roskikseen tai viiltojätteeseen.
3. Heitä käsineet roskikseen, käsidesi käsiin ja uudet käsineet ja 2kpl alkoholillista pyyhintälappua, yksi molempiin käsiin ja valmiiksi sivuun 2kpl alkoholitonta pyyhintälappua. Pidä puhtaat käsineet pyyhintälapun suojassa. Pyyhi pinnat puhtausjärjestyksessä:
   1. Käytetyt materiaalipakkaukset: pyyhi ja laita kaappiin.
   2. Työtaso, roiskeniante, kahvat, valo
   3. Jokainen käsikappale, letku ja alla oleva silikonisuoja
   4. Silikonipeitteinen potilastarjotin
   5. Imut
   6. Ota alkoholiton pyyhintälappu ja pyyhi skanneri, näyttö ja tuoli

47

Pintapyyhintäaineemme, desinfiointinesteemme

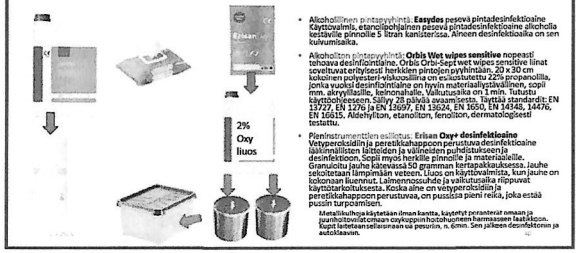


- Alkoholillinen pintapyyhintä. **Easydes** pesevä pintadesinfektioaine käyttövalmis, etanolipohjainen pesevä pintadesinfektioaine alicholia kestävälle pinnoille 5 litrain kanisterissa. Aineen desinfektioaika on sen kuivumisaika.
- Alkoholiton pintapyyhintä **Orbis Wet wipes sensitive** nopeasti tehoava desinfiointiaine. Orbis Orbi-Sept wet wipes sensitive liinat soveltuvat erityisesti herkkien pintojen pyyhintään. 20 x 30 cm kokoinen polyesteri-viskoosiliina on esikostutettu 22% propanolilla, jonka vuoksi desinfiointiaine on hyvin materiaaliystävällinen, sopii mm. akryylilasille, leimonhalle. Vaikutusaika on 1 min. Tuhuttu käyttöohjeeseen. Säilyy 28 päivää avaamisesta. Täyttää standardit: EN 13727, EN 1276 ja EN 12697, EN 13624, EN 1650, EN 14348, 14476, EN 16615. Aldehyiton, etanoliton, fenoliton, dermatologisesti testattu.
- Pieninstrumentilen esiliotus. **Erisan Oxy+ desinfektioaine** Vetyperoksidilin ja peretikkahappoon perustuva desinfektioaine lääkinnällisten lätteiden ja välineiden puhdistukseen ja desinfektioon. Sopii myös herkille pinnoille ja materiaaleille. Granuloitu jauhe kätevässä 50 gramman kertapakkauksessa. Jauhe sekoitetaan lämpimään veteen. Liuos on käyttövalmista, kun jauhe on kokonaan liuennut. Lämpennossuhde ja vaikutusaika riippuvat käyttötarkoituksesta. Koska aine on vetyperoksidilin ja peretikkahappoon perustuva, on pussissa pieni reikä, joka estää pussin turpoamisen.

  Metallikuitoja käytetään ilman kanttia, käytetyt perianerat omaan ja jaurihotoviatomaan ongkoppiin hotohuonnem harmaaseen laatikkoon. Kupit laitetaanseellaisenaan uä pesuriin, n. 6min. Sen jälkeen desinfektonin ja autoklaavin.

48

Imudesinfiointimme

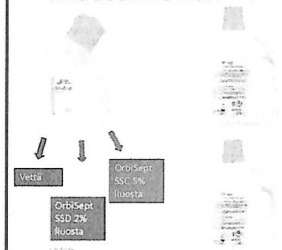

- Tärkeintä on juoksuttaa tarpeeksi vettä imuihin! Mikään desinfiointiaine ei riitä, jollei letkuissa kulje tarpeeksi vettä. Tätä varten on "sorsa" = Oro Cup.
- **Oro Cup** pidetään aina puhtaana! Älä **kytke ilkaisia imuholkkeja** Oro Cuppiin!
- Puhdista/ tyhjennä/ vaihda aamulla imusihdit!
- Aamuisin 2l vettä Oro Cupin kautta imuihin.
- Potilasvaihdoissa, eritoten veristen toimenpiteiden jälkeen, ime vettä imuihin kraanasta/ kertakäyttömukista.
- Lounastaukoa ennen/ aikaisin aamulla vesi-imun jälkeen: **2l ime 1x/ vko 5% OrbiSept SSC** teho puhdistus aine imuihin. Min vaikutus aika 30min, max vaikutus aika 2t.
- Muutoin **OrbiSept SSD 2%** päivän päätteeksi imuihin. **1l** OrbiSept SSD tehoimun pesu- ja desinfiointitiiviste Tehoimun puhdistus- ja desinfektiotiiviste. Laimenna 1-3% liuokseksi (1 litra vettä + 10-30 ml konsentraattia). Katso tarkemmat käyttöohjeet pakkauksesta. Orbi-Sept Absauganlagendesinfektion.

49

Välinehuollon erot huone1 ja huone2

- **Hygienistimme käyttävät nyt pakattuja instrumenttikasetteja. Steriilointipussin pohja jätetään instrumenttikasetin alle. Metalliitarjottimet eivät ole enää käytössä huoneessa 2. Instrumenttikasetit kulkevat sellaisinaan sekä desinfektorin, että (pakattuina) autoklaavin läpi.**
- **Hygienistin kasetissa on tilaa 8 instrumentille – käytössä yleensä 5:**
  - Peili
  - lemtaskumittari
  - LM mes ja dist kyretti
  - Sirppi
- **Vieläkin tärkeämpää pyyhkiä heti instrumentit kaikesta kiinnittyneestä liasta.**
- **Teroituksesta tulleet/ uudet instrumentit voidaan autoklavoida ryhmäpussittaen.**



50

Välinehuolto, materiaalivarasto

- Aluejako:
  1. Likainen
  2. Desinfioitu
  3. Steriloitu
- Laitteisto:
  1. Ultraääni pesuri
  2. Desinfektori
  3. Öljyämis pullot
  4. Kuumasaumaaja
  5. Vakuumiautoklaavi
- Materiaalivarasto






51

Välinehuolto

Yritämme kaikki parhaamme tekemällä asiat yhdessä ja samalla tavalla

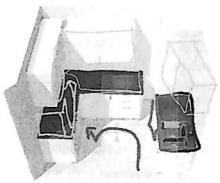


- **Välinehuolossa on vain yksi "liikennesuunta" = oikealta vasemmalle!**
  - Punainen = LIKAINEN
  - Sininen = DESINFIOITU, PAKKAUSPUHDAS = STERILOITU, AUTOKLAVOITU
- **Desinfektorista tulleet nostetaan joko "siniseen yläkaappiin" tai vasemmalle "siniselle työtasolle"**
- **Autoklaavista tulleet nostetaan yläpuoliseen "vihreään yläkaappiin"**
- **Autoklaaviin ei ikinä laiteta ei perforoituja tarjottimia**
- **Autoklaavin tarjottimet eivät saa kulkea likaiselle alueelle**
- **Desinfektorista tulleet eivät saa tulla autoklaavoitujen instrumenttien joukkoon "vihreään yläkaappiin"**
- **Muista aerosoli cross infection!!!** Mikään ei pysy puhtaana välinehuollossa, jollei paineilmaa käytetä laatikkonsa sisällä !

52

Välinehuolto

Yritämme kaikki parhaamme tekemällä asiat yhdessä ja samalla tavalla

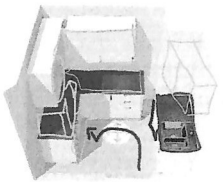

Paineilmakuivaus:

- Meillä ei ole säännönmukaisessa käytössä 87 min P3 desinfiointiohjelma desinfektorissa! Käytämme P2 57 min pesuohjelmaa, jonka jälkeen kaikki instrumentit menevät autoklaaviin.
- Vaikka instrumentit olisivat käyneet desinfektorin P3 ohjelman, niin mikään onteloinstrumentti ei ole puhdas desinfektorin jälkeen. **Siksi paineilmakuivaus on aina likaista ja se tulisi tehdä vain oman laatikkonsa sisällä! Paineilma rikkoo desinfektorin. Paineilmaa ei saa käyttää desinfektorin sisäpuolella.**

53

Otteita lakiteksteistä

- Tartuntatautilaki 17 §
  - Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on toteuttava suunnitelmallisesti tehtoon liittyvää infektiotorjuntaa.
- Terveydenhuoltolaki 8 §
  - Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.
- Laki potilaan oikeuksista 3 §
  - Potilaalle on oikeus saadakseen hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.

denstal

54