

MedNiemen Hygieniasuunnitelma 2026

55

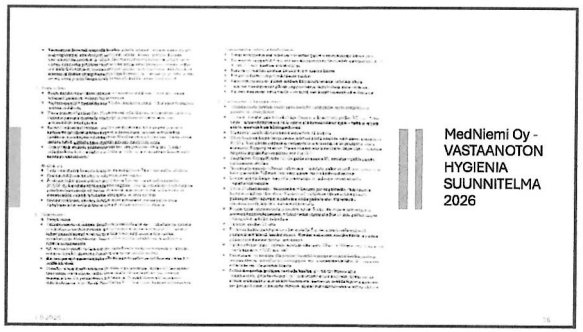


MedNiemi Oy - VASTAANOTON HYGIENIA SUUNNITELMA 2026

56

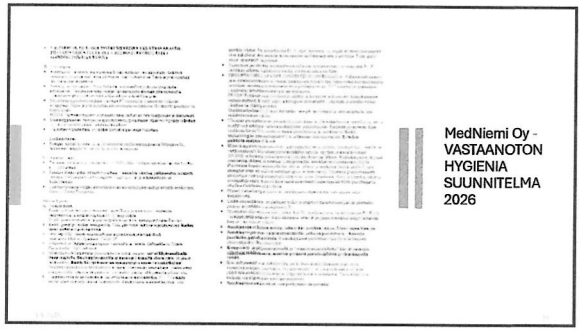

MedNiemi Oy - VASTAANOTON HYGIENIA SUUNNITELMA 2026


57

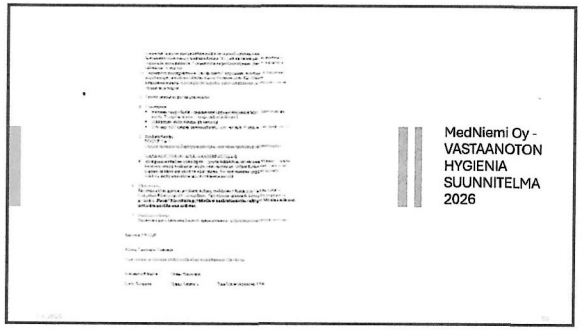

MedNiemi Oy - VASTAANOTON HYGIENIA SUUNNITELMA 2026

58

Ultraäänipesuri

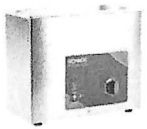




- on pelkästään mekaaninen, ei desinfiova puhdistaja.
- UÄ:ssä on aina verkkokaukalo kokonaan nesteessä, kts max täyttöraja.
- UÄ pesulaitteeseen ei laiteta likaisia instrumenttejä vaan kippoja, joissa käsittelemättömiä, likaisia instrumentteja. Laite pysyy silloin puhtaampana.

59

Desinfektori

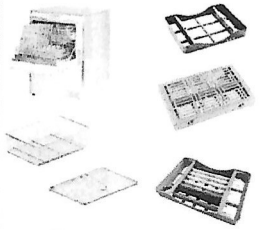

- Desinfektori on paljon enemmän kuin "tiskikone". Sinne laitetaan likaiset/ käytetyt instrumentit kaseteissa ja pieninstrumentisto koreihin.
- Desinfektorissa on 3 ohjelmaa:
  - Vesihuuhtelu 27min P1:
    Käytetään ainoastaan päivän päätteeksi, minimi instrumenttimäärälle
  - Pesuohjelma 57min P2:
    Käytetään yleisimpänä ohjelmana, jonka jälkeen kaikki autoklavoidaan
  - Desinfiointiohjelma 87min P3
    Käytetään jos halutaan desinfektorista ei-onteloinstrumentit suoraan hoitohuoneeseen ja pesutestitulosten toossa.

60


Kertausta: Välinehuolto



- **Muista: desinfektorin ylitäyttö pilaa pesutuloksen!**
  - **Instrumenttipesukasetit eivät saa olla päällekkäin**
    - Alas mahtuu 10kpl pesukasettia tai tarjotinta, ylös 1kpl
    - Kun täyttä, priorisoi instrumenttejä, ei tarjottimia - niitä löytyy
  - **Metallikorit eivät saa niin täyslä, että tavarat jäävät päällekkäin**
  - Silikonit menevät päivän päätteeksi alas
- Desinfektorin tulee pyöriä 3-4 krt/ pvä
  - Käytettyjen instrumenttien tulle olla viimeistään 4 tunnin päässä käytöstä pesussa!
- Käytä käänneltäviä lappuja: onko koneessa likaista vai puhdasta, mikä ohjelma ollut käytössä
  - Huuhdeltu on likaista P1
  - P2 ja P3 ohjelmat ovat puhtaita
- Kalkkien työpöytien tulee olla mahdollisimman tyhjiä, jotta pöytäpinnat saa pyyhittyä

61

Kuumasaumaaja

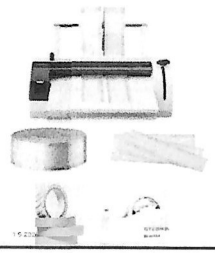


- Kuumasaumaajalla suljetaan steriloitavat autoklaavipussit (sterilointiletku, sterilointipussi)
- Sauman tulee olla kokonainen ja rypytön, pussin tulee pysyä ehjänä
- Kuumasaumaus pitää pakkauksen steriilinä vuoden
- Autoklaaviteipattu pussi pysyy steriilinä 6kk

PÄIVÄYSTEN KIRJAAMINEN PUSSEIHIN, SAUMAN ULKOPUOLELLE, MILLOIN EPÄSTERIILI

62

Autoklaavimme: Euronda ja Melag

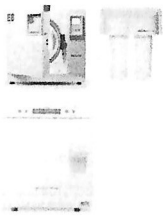

- Hammashoidossa on B-luokan, tyhjiöautoklaaveja, koska käytössämme on pakattuja onteloinstrumentteja.
- Eurondalla on omat vesisuodattimet, Melagiin tulee lisätä ja tyhjentää tislattua vettä.
- Ohjelmia ovat:
  - Pakkaamaton: 134R (=134 C regular)
  - Pakattu: 134B (=134 C, vacum)
  - Vacum/ tyhjiövuototesti
  - Helix
  - Bowie&Dick
  - (Prion)

63