
Ultraääni pesurit
- laadunvalvonta 1x/ vko

MEDNIEMI

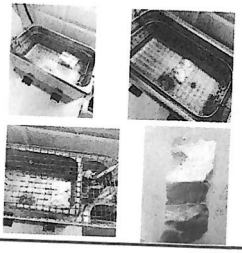

- UÄ pesuriin tulee laittaa kaikki poranterät aina ennen desinfektoria. Siksi niillä on oma metallinen oxy 2% keräys kuppi hoitohuoneessa. Kuppi laitetaan sellaisenaan UÄ pesuriin, 5min.
- UÄ pesuriin tulee laittaa kaikki juurihoitoneulat/-viilat aina ennen desinfektoria. Siksi niillä on oma metallinen oxy 2% keräys kuppi hoitohuoneessa. Kuppi laitetaan sellaisenaan UÄ pesuriin, 5min.
- Implanttikirurgian porat ja osat laitetaan omassa silikonisessa kotelossaan UÄ pesuriin, 5min.
- Välinehuollon UÄ pesuri on reilusti huoneen 1 UÄ pesuria tehokkaampi.
- **UÄ pesurin käyttöajan määrittää folio testil On aika, jolloin folio perforoituu UÄ pesurissa. UÄ on mekaaninen puhdistus, ei kemiallinen! UÄ pesurissa voi veden joukossa olla saippuaa, ei muuta.**

73

Kuumasaumaaja Anthos

MEDNIEMI




- Kuumasaumaajaa ei voi käyttää ennen kuin se on lämmennyt! Vihreä valo palaa jatkuvana!
- Takana löytyy paino – metalli rulla
- Autoklaavi-/ sterilointipussin kuumasauma on voimassa 12kk saumauksesta – pvm merkintä pussien saumojen ulkopuolelle
- Kokonainen, rypytön sauma – AINA!

74

Karkeavesisuodattimet – kuuma- ja kylmävesi

MEDNIEMI

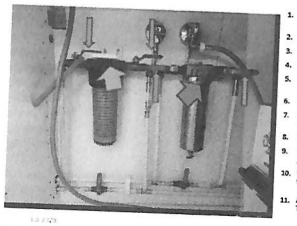

1. Kylmävesisuodatin on vasemmalla. Sulje vihreät vesi hanat, jotka ovat ennen ja jälkeen kylmävesisuodatinta.
2. Avaa lavuaarin hana kylmälle puolelle. Odota, että veden tulo loppuu.
3. Avaa musta kiinnitysrengas yhdeltä, smsellä rengas avaimella (roikkuu vieressä)
4. Ota suorakaiteen muotoinen ämpäri alle ja kuivaus rätti
5. Vaihda suodatin uuteen, löytyy kulma ylätaapista, 5 mikronin suodatus. Puhdista säiliön pohja. Täytä säiliö vedellä ennen takaisin ruuvaamista.
6. Aukaise vihreät vesi hanat ja laite vesi hana lavuaarista kiinni
7. Lämminvesisuodatin on oikealla. Laita kuumaveden vihreät hanat kiinni, ennen ja suodattimen jälkeen.
8. Aukaise taas vesi hana lavuaarista mutta nyt kuumalle puolelle
9. Kuuma veden suodattimella on oma pyörea, "pikku" avaaja. Sillä on sininen pää ja musten metallia. Avaa suodattimen takana
10. Vaihda uuteen suodattimeen, puhdista säiliön pohja, täytä säiliö vedellä ennen takaisin kiinnitystä. Aukaise vihreät vesi hanat säiliön molemmin puolin
11. ÄLÄ KOSKE ALIMMAISIIN VESISULKUIHIN! *NE OHITTAVAT SUODATTIMET TARVITTAESSA.*

75

Tislatun veden teko

MEDNIEMI




- Tislattua vettä käytetään Melag autokiinavissa, Cerec MCX jyrsimessä ja juurihoidoissa.
- Veden tekemiseen menee min 4t, ell sitä voi tehdä vain aamulsin.
- Kammio täytetään vesijohtovedellä, joka haetaan vastaanoton puolelta, merkkiin FULL asti. Kansi yhdistetään pohjaan ja pohja jatkojohtoon. Sinnen astia laitetaan nokan alle.
- Kammio on puhdistettava joka käyttökerran jälkeen sitruunahapolla.
- Sitruunahappo on jauhe, joka paakkuuntuu kivikovaksi klontiksi, jos joutuu kosketuksiin veden kanssa.
- Laitteen käyttoohjeen mukainen puhdistus on lisata kammioon 4t vettä ja 30ml sitruunahappoja ja käynnistää kone, ILMAN irrotettuna kansiosna, ja antaa veden kiehua hetki. Sitten vesi kaadetaan pois ja kammio pyyhitaan.
- Olemme huomanneet, että tehokkaampi ja nopeampi tapa on heti veden valmistumisen jälkeen pyyhkia kammio lampimmalla puhtaalla paperilla. Kerttaa omalla vedenkiertumellemme. 1dl kiehuvaa vettä, laittaa se ja teetusikallinen sitruunahappoa kammioon ja kayttaa puhdistussienen pehmeaa puolta katkin irrottamiseen kammiosta.

76

MEDNIEMI OY -VASTAANOTON RISKIKARTOITUS 2026


MEDNIEMI

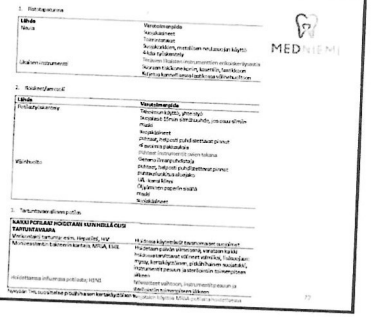

77

MEDNIEMI OY -VASTAANOTON RISKIKARTOITUS 2026

MEDNIEMI

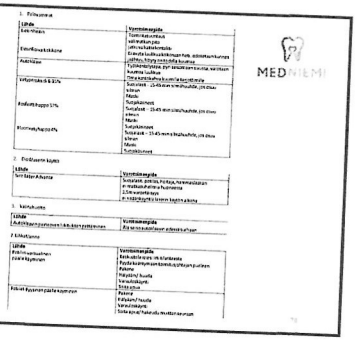

78

MITEN TOIMIMME UHKATILANTEESSA

MEDNIEMI

Vastaanottovircle niitään ean arvokasta, että sitä eihi puolustettava omaa fyysisen tai proyykinen. hyvinvoinnin uhalla. Fyysinen vakivalta ei ole puolustelkavissa ja johtaa aina vastaamiskin.

1. Ota puhelin tai kämoykkä mukaasi ja lahdo ulos, jotta riehuja ei hurmaan, soita
   - poliisi 112
   - talousmies Kerjaan talopalvelu 0800 472005
   - nanniöttäjälle 044 2547521 Tom Eklund
     0107359211 Linda Herrman Kuntu Oy
     [illegible]
     050 2573488 Zip ahorjoitaja Petra Grönholm
     [illegible]
   - Taloyhtiön hallituksen jäsenille 040 881 33000 Monica Danberg
   - Hammaslääkärille 050 535 5071 Helena Tuomaala Niemincn
     041 3101960 Anna Leena Tapanaen
     040 515 7677 Thomas Åberg
   - Työkavereille 040 5552 881 Linda Bergman
     040 7255224 Tina Grönholm Jung
     050 7758 707 Minna Hasta aho
     050 374 5629 Kimmo Niemunen

2. Jos tehtäänestellään, on joku huoneessa "valkoltanmies" /"Suhtymiehiä", jotka lisäksemmalla voitat yllätysmomentin ja pääset tulos. Hakuudu muiden seuraan: huoneesta 2 huoneeseen 3 ja huoltohuoneen oven kahteen, portki, tlaste, terveydenhuo, haapat.
3. Ulkokäyntejä on 2 **ulko-ovee ja pelotlikset OFIG** huoneen ilkmasta
4. Jos epamiellyttävä tilanne on mahdollista urhottaa puhumalla, pyydä henkilöä järjestämään yhteystietonsa tai käyntyrajan tuomitsijohtaja Helena Tuomaala Niemisen puolesn. Älä koskaan anna Helena Ikimyhkä nimeesi **puttelle!**
5. Pyri aina välttämään ongelmatilanteita etukäteen. **Meidän ei ole koskaan aikaa saada** puttiaita. Ennaqua aika pyritään antamaan /**TARJOTAAN AINA CMBIE POTILAIDE 10IN** ole sinulla. Joku tahansa hammaslääkäre tai hygienisti, flyttaja voi antaa ennaqua tuhmesa ratkaan. Hoitajan on aina pimmttava mennimmesa olevaansa hoitaja je ettei hänen nauvonsa tei olla Gryan kattaria

79

MEDNIEMI

TULIPALON SATTUESSA

1. Esisammutus sammutuspeitteellä: hoitohuoneissa, välinehuollossa, keittiössä ja eteiskäytävällä.
2. Vaahtosammutin vastaanoton eteiskäytävällä ja taloyhtiön rappukäytävässä.
3. Jos palo ei hallinnassa 2 minuutissa: soita apua, sulje hapentulo tilaan (ovet, ikkunat, ilmanvaihto), älä aseta itseäsi alttiiksi.

80

Vastaanoton ilmalämpöpumput

- Vastaanotolla on 4 sisäilmayksikköä ja 2 ulkoilmayksikköä.
- Respa ja huone2 ovat samassa ulkoyksikössä. Välinehuolto ja huone1 ovat toisessa.
- Yksi ulkoilmayksikkö ei voi viilentää ja lämmittää yhtä aikaa! Välinehuollon lämpötilan tulee olla alhainen, koska materiaalivarastomme ei pidä yli 25 asteen lämpötiloista.

Huone1 ilmalämpöpumpulla ei pääsääntöisesti voi lämmittää!!!

Älä ota välinehuollon viilennystoimintoa pois.

Lämpötilaa ja tuulettimen suuruutta voi muuttaa.

MEDNIEMI

Din tandläkare - Sinun Hammaslääkärisi

81