
## Autoklaavimme: Euronda ja Melag

MEDNIEMI

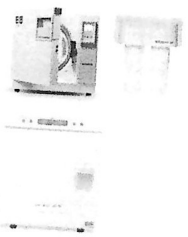

- Hammashoidossa on B-luokan, tyhjiöautoklaaveja, koska käytössämme on pakattuja onteloinstrumentteja.
- Eurondalla on omat vesisuodattimet, Melagiin tulee lisätä ja tyhjentää tislattua vettä.
- Ohjelmia ovat:
  - Pakkaamaton: 134R (=134 C regular)
  - Pakattu: 134B (=134 C, vacum)
  - Vacum/ tyhjiövuototesti
  - Helix
  - Bowie&Dick
  - (Prion)

28.8.2026

21

21

## Välinehuollon laadunvarmennus, ylläpitotehtävät ja huoltotoimenpiteet

1. Laadunvarmennus – läpäistävä 1x/vko
   1. Autoklaavin Vacum/ Vuototesti ja Helixtesti maantai aamulsin ja keskeilä päivää
   2. Ultraäänen follotesti
   3. Desinfektorin pesuohjelma 3 testi
2. Ylläpito
   1. Autoklaavin kammio tulee pyyhkiä joka aamu (kun vielä kylmä) A12T – kerää öljyä
   2. Autoklaavin vesisuodatinsihti tulee avata ja puhdistaa nöyhdästä
   3. Desinfektorin tulee laittaa suolaa ja puhdistaa clean ohjelmalla
3. Huoltotoimenpiteet
   1. Pääveden karkeavesisuodattimien vaihto
   2. Autoklaavin omien vesisuodattimien vaihto
   3. Desinfektorin lapojen ja suodattimien puhdistus

MEDNIEMI
Din tandläkare · Sinun Hammaslääkärisi

28.8.2026

22

22

## Joka laitteella on laadunvalvontatestit - kirjataan seinällä olevaan taulukkoon

MEDNIEMI

| UÄ | Foliotesti | Viikoittain | Perforoiduttava käytetyssä ajassa |
|---|---|---|---|
| Desinfektori | Pesutesti P3 | Viikoittain | Väriläiskän on kadottava kokonaan |
| Melag ja Euronda | Vuototesti | Viikoittainen | Melag alle 1, Euronda ok |
| | Helix testi | Viikoittainen | Liuskan oltava tumma |
| | Itiötesti | Vuosittainen | Raportti Kaikomed |
| Lääkejääkaappi | Lämpötilan kirjaus | Viikoittainen | Kirjataan seinälle |
| Sidexis 2D ja 3D röntgen | Laadunvalvontakuvat omilla testikappaleilla | Kuukausittain | Mapitetaan |
| Röntgen kuvakkeet | Kuvakkeiden virheettömyys | Puolivuosittain | Jäävät testipotilaalle Sidexikseen |

28.8.2026

23

23

## Autoklaavi: Euronda

– tyhjiövuototesti

MEDNIEMI



1. Tehdään viikc
2. Autoklaavi ei saa olla päällä kauempaa kuin n. 3 min ennen testin tekoa = klaavin täytyy olla kylmä kun testi tehdään
3. Paina valikosta Vacuum: ohjelma kestää n. 20 min
4. Hyväksytty Vacuum testi on: ”Ok” – kirjataan taulukkoon

28.8.2026

24

24