Desinfektori Hydrim
- suolan lisääminen

MEDNIEMI







- Desinfektori pyytää suolan lisäämistä
- Alakori vedetään ulos
- Koneen lattiassa oikealla kierrekorkki
- Kierrä korkki pois, täytä kammio raesuolalla, kierrä korkki takaisin

29

Paineilma

MEDNIEMI



- Paineilmalla ei saa puhaltaa ihoon – paine on niin suuri, että riski ihonalaisen ilmakuplan muodostumiseen on suuri!
- Paineilma on seinäkoukussa
- Paineilmalla kuivataan **vain desinfektorisyklin läpikäyneet** märät instrumentit kannellisen muhvilaatikon sisällä!
- Kuulosuojaimia tulee käyttää!

30

Ultraääni pesurit
- laadunvalvonta 1x/ vko

MEDNIEMI










- UÄ pesuriin tulee laittaa kaikki poranterät aina ennen desinfektoria. Siksi niillä on oma metallinen oxy 2% keräys kuppi hoitohuoneessa. Kuppi laitetaan sellaisenaan UÄ pesuriin, 5min.
- UÄ pesuriin tulee laittaa kaikki juurihoitoneulat/-viilat aina ennen desinfektoria. Siksi niillä on oma metallinen oxy 2% keräys kuppi hoitohuoneessa. Kuppi laitetaan sellaisenaan UÄ pesuriin, 5min.
- *Implanttikirurgian porat ja osat laitetaan omassa* silikonisessa kotelossaan UÄ pesuriin, 5min.
- Välinehuollon UÄ pesuri on reilusti huoneen 1 UÄ pesuria tehokkaampi.
- **UÄ pesurin käyttöajan määrittää folio testi! On aika, jolloin folio perforoituu UÄ pesurissa. UÄ on mekaaninen puhdistus, ei kemiallinen! UÄ pesurissa voi veden joukossa olla saippuaa, ei muuta.**

31

Kuumasaumaaja Anthos

MEDNIEMI



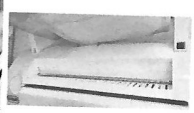



- Kuumasaumaa, käyttää ennen kuin se on lämmennyt! Vihreä valo palaa jatkuvana!
- Takana löytyy paino – metalli rulla
- Autoklaavi-/ sterilointipussin kuumasauma on voimassa 12kk saumauksesta – pvm merkintä pussien saumojen ulkopuolelle
- Kokonainen, rypytön sauma – AINA!

32